

HEATED BACK BELT SUPPORT



Unisex

CONGRATULATIONS on your purchase of the ObusForme® Back Belt. When used together with a complete back safety training program, your back belt is designed to support your lower back and abdominal muscles to help promote proper posture and good body mechanics while lifting, pushing, pulling, walking, and repetitive bending or twisting.

WARNING


This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.


1. Detach the dual-elastic abdominal panels. Grasp each end of the mesh wrap. Stretch and secure the right end across the left in a comfortable position on the hook and loop closure.



2. Grasp each dual-elastic abdominal panel. Stretch and secure each panel in a comfortable position on the hook and loop closure.

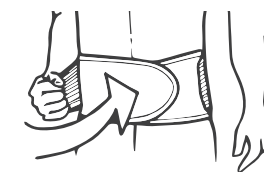

3. The top edge of the back belt should be at or just below your navel. The back belt should not be worn around the midsection of the stomach but should fit snug and low over your hips.

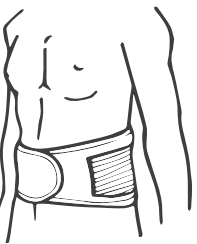

Please Note: Do not rely on your back belt to become a substitute for good lifting, bending, pulling, pushing, or twisting techniques.

Your back belt will not enable you to lift heavier amounts of weight.

Do not subject yourself to any risk by lifting more weight than you can handle.

Only wear your back belt if you are performing tasks where proper posture and good body mechanics are an issue. Continuous wear may cause loss of muscle tone.


CARE FOR YOUR BACK BELT

To Clean:

- Do not machine wash.
- Spot clean with a slightly damp cloth only.
- Do not bleach.
- Lay flat to dry. Do not machine dry.

Instructions for Heating function:

1. Connect the control cable to the power bank and back belt
2. Press the button on the control cable to turn unit on. Press the button again to select temperature.

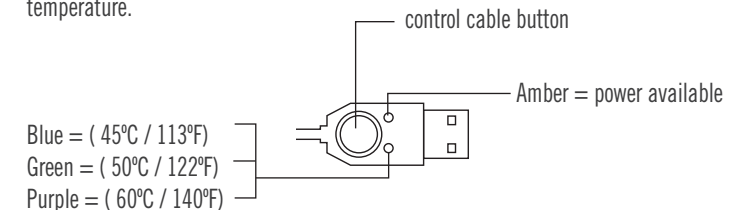

3. When not using the heat setting the back belt can be used for support.

Protective setting: the heating function of the back belt will automatically shutdown after 20 minutes. It must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.

Instructions for Charging Power Bank:


1. Use Micro USB (≡) to connect to battery
2. Use USB (≡) to plug into available USB charging port

Powerbank should last up to 4 hours upon full charge. Full charge of Powerbank can take up to 3 hours.

To check remaining power capacity of Power Bank, press the indicator button when the device is not charging. Battery indicator will show the following status:

Power Level Indicator.

- 1 : 0~25%
- 2 : 25~50%
- 3: 50~75%
- 4 : 75~100%

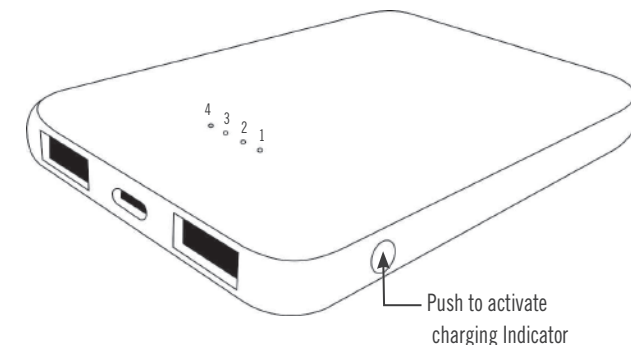

Warning: Any discomfort when using the product stop using immediately and consult a physician.

OBUSFORME LIMITED WARRANTY

ObusForme™ guarantees this product will be free from defects in workmanship & materials for a period of one (1) year from the date of original purchase . This guarantee applies when the product is used for the purpose intended. In the advent of a defect as described above, the product will be replaced with a new or refurbished product &/or substitute if the purchaser can provide the original purchase receipt. Shipping, customs, duties & taxes must be PRE-PAID TO & FROM ObusForme™ by the PURCHASER. This warranty gives you rights that vary by province/state. This warranty may change.

WHAT IS NOT COVERED

Wear & tear, aging (including foam discoloration, flattening, density, consistency), accidental damages, alterations, mishandling, faulty adjustment, misuse, improper care, power damage, rental use, discontinued items, service by anyone other than ObusForme™, shipping damages, neglect, items sold 'as is' or damage due to natural acts are NOT covered.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

Please obtain a Return Authorization Number & instructions prior to sending your item or it may be denied. Please inform Customer Service by:

Mail: HoMedics Group Canada
6460 Kennedy Road. Unit C
Mississauga, Ontario, Canada L5T 2X4
Telephone: (416) 785-1386 Fax: (416) 785-5862
Toll Free: 1-888-225-7378
8:30 a.m. to 5:00 p.m., Mon - Fri EST
www.ObusForme.com

LA CEINTURE POUR LE DOS AVEC SUPPORT CHAUFFANT



Unisex

FÉLICITATIONS d'avoir acheté la Ceinture pour le dos ObusForme®. Utilisée avec un programme complet de sécurité pour le dos, votre ceinture pour le dos a été conçue pour soutenir le bas du dos et les muscles abdominaux afin de promouvoir une bonne posture ainsi qu'une bonne mécanique corporelle lors de soulèvement, poussée, tirée, marche, et courbure ou flexion de façon répétitive.

ATTENTION

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par une personne (y compris un enfant) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou avec peu d'expérience et de connaissances, sauf si une personne responsable de leur sécurité la supervise ou lui a donné des instructions claires sur l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.


1. Détachez les panneaux abdominaux. Prenez chaque bout de la bande. Entrez le bout droit sur le bout gauche jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise et fixez-le sur la fermeture adhésive.



2. Prenez chaque panneau abdominal. Étirez chaque panneau de façon à être à l'aise et fixez-le sur la fermeture adhésive.



3. Le bord supérieur de la Ceinture pour le dos doit se trouver au niveau de votre nombril ou juste en dessous. La Ceinture pour le dos ne doit pas être portée autour du thorax, mais doit être bien ajustée, bas sur les hanches.

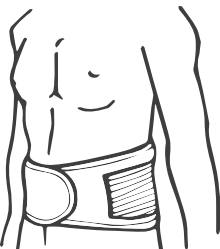

Remarque : La ceinture pour le dos ne doit pas remplacer les bonnes techniques de soulèvement, de tirée ou de poussée de charges ni les bonnes façons de se tourner le corps.

La ceinture pour le corps ne vous permettra pas de soulever de poids plus lourds.

Ne vous mettez pas en position de risque en soulevant des poids plus lourds que ne le permettent vos capacités.

Ne portez la ceinture pour le dos que si vous exécutez des tâches pour lesquelles la tenue et une bonne mécanique corporelle représentent un problème. Un port continu pourrait entraîner une perte de tonus musculaire.


ENTRETIEN DE LA CEINTURE POUR LE CORPS

Nettoyage :

- Ne faites pas de lavage en machine.
- Détachage avec un tissu humide uniquement.
- N'utilisez pas de javellisant.
- Faites sécher à plat. Ne la faites pas sécher à la machine.

Instructions pour la fonction chaleur :

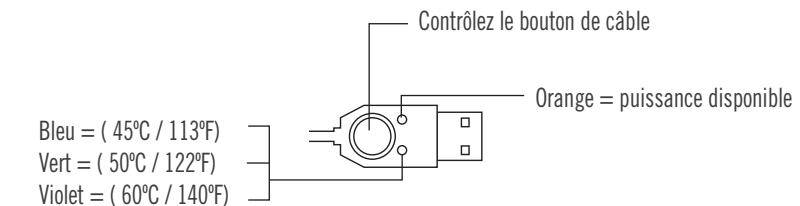

1. Raccorder le câble de contrôle au chargeur portatif et ceinture lombaire
2. Presser le bouton sur le câble de contrôle pour activer l'unité. Presser encore le bouton pour choisir la température.



3. La ceinture lombaire peut servir de soutien quand le réglage chaleur n'est pas utilisé.

Réglage de protection: la fonction chaleur de la ceinture lombaire s'arrêtera automatiquement après 20 minutes. Il doit uniquement être alimenté à une tension sécuritaire extrabasse correspondant à l'inscription sur l'appareil.


Instructions de charge du chargeur portatif :

1. Relier le Micro USB () à la pile
2. Brancher le USB () dans le port de charge USB disponible

Powerbank a une autonomie jusqu'à 4 heures une fois une charge complète. La pleine charge de Powerbank peut prendre jusqu'à 3 heures.

Pour vérifier la puissance restante du chargeur portatif, presser le bouton indicateur quand l'appareil n'est pas en charge. L'indicateur de pile montrera l'état suivant :

- Indicateur de niveau de puissance.
- 1 : 0~25%
 - 2 : 25~50%
 - 3 : 50~75%
 - 4 : 75~100%

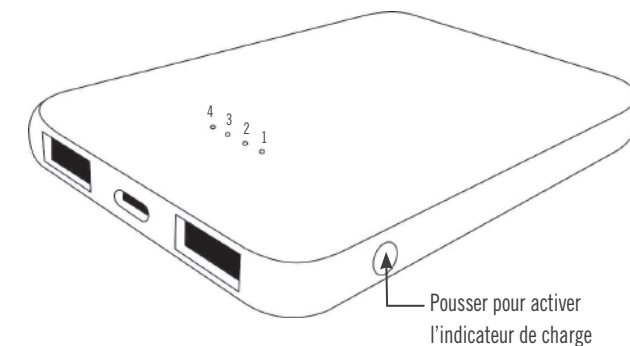

Avertissement: En cas de tout malaise en utilisant le produit, cessez l'utilisation immédiatement et consultez un médecin.

GARANTIE D'OBUSFORME LIMITÉE

ObusForme^{MC} garantit ses produits tout défaut de fabrication et de matériel pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat originale. Cette garantie s'applique uniquement si le produit est utilisé aux fins prévues. Dans l'éventualité d'une défectuosité décrite ci-dessus, ObusForme^{MC} remplacera le produit par un produit identique ou équivalent nouveau ou remis à neuf si l'acheteur peut fournir une preuve d'achat originale. Lorsqu'un produit est envoyé à ObusForme^{MC}, l'expédition, les frais de douane et les taxes doivent être PRÉPAYÉS À L'ENVOI ET AU RETOUR PAR L'ACHETEUR. Cette garantie vous donne des droits pouvant varier d'un état ou d'une province à l'autre. Cette garantie peut faire l'objet de modification.

ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

La garantie NE COUVRE PAS l'usure normale, le vieillissement (y compris la décoloration de la mousse, l'aplanissement, la densité et la consistance), les dommages accidentels, une altération, une mauvaise manipulation, un mauvais ajustement, une mauvaise utilisation, un mauvais entretien, des dommages électriques, une utilisation sous location, les produits abandonnés, une réparation réalisée par quiconque autre qu'un professionnel autorisé par ObusFormeTM, les dommages durant l'expédition, la négligence, les produits vendus « tels quels », ou les dommages causés par un sinistre naturel.

OBTENTION D'UN SERVICE SOUS GARANTIE

Veillez obtenir un numéro d'autorisation de retour et des instructions avant de nous faire parvenir un produit, sans quoi nous pouvons refuser votre demande. Veuillez aviser notre service à la clientèle :

Courrier :
HoMedics Group Canada
6460 Kennedy Road. Bureau C
Mississauga, Ontario, Canada L5T 2X4
Téléphone : 416-785-1386 Téléc : 416-785-5862
Sans frais : 1-888-225-7378
De 8 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi, HE
www.ObusForme.com