

OBUSFORME®

Professional

ENGINEERED FOR THE HUMAN BODY™

CUSTOMAIR® BACKREST SUPPORT WITH ADJUSTABLE LUMBAR



CL-PROF-01

CONGRATULATIONS

Thank you for your purchase of the ObusForme® CustomAIR Backrest Support with Adjustable Lumbar. The award-winning ObusForme® Backrest Supports provide support and comfort for your back to assist in the prevention and relief of back pain. The only backrest exclusively endorsed by the Canadian Chiropractic Association, it contains an "S"-shaped frame that conforms to the contours of the back to guide the spine into correct alignment and place you in a proper sitting posture. The ObusForme® CustomAIR® Backrest features an internal, inflatable lumbar support system. Lightweight and portable, each backrest support turns any chair into an ergonomic seating system; they can be used in the home, office, vehicle, or anywhere else you sit.

WARNING

Before using your ObusForme CustomAIR Backrest Support in a vehicle, please consult the owner's manual to ensure that you can properly adjust your vehicle's seat and/or headrest after installation of the ObusForme CustomAIR Backrest Support.

USING THE ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT SYSTEM

IMPORTANT NOTE: ALWAYS RELEASE THE AIR BEFORE PERFORMING ANY ADJUSTMENTS ON THE VERTICAL LOCATION OF THE LUMBAR SUPPORT BLADDER. See DEFLATE section below for instructions on deflating.

The internal inflatable lumbar support system provide added support for the lower spine by filling in the lower inward curve of your back. For custom support to find the lumbar height that fits your comfort position, pull the top strap to raise the lumbar support. Pull the strap down to lower the lumbar support. Once you have located the best position vertically, pump up the support using the bulb that is conveniently stored in the velcro pouch on the side of the backrest. Lumbar supports can be used for everyday use as extra lower back support or to reduce spinal stress in people with a marked lumbar lordosis or sway-back.

Please Note: It is not necessary to use the internal inflatable lumbar support system on your ObusForme® CustomAIR® Backrest Support. If the internal inflatable lumbar support system feels bulky or uncomfortable, you may not have an excessive lumbar curve that requires extra support. Adjust the lumbar support system up and down as well as inflation or deflation level to find the suitable amount of comfort for you.

The inflation pump bulb and tube should be stored in the pouch when the desired lumbar support has been achieved.

INFLATING AND DEFLATING THE LUMBAR SUPPORT

INFLATE: Rest your lower back against the CustomAIR®. From full deflation, there are approximately 50 comfort positions for the internal inflatable lumbar support system. When you have reached the most comfortable position for your back, simply stop pumping. The level of air in the lumbar support will remain fixed indefinitely until changed.


DEFLATE: Press the deflate button, that is located above the bulb at the end of the inflation tube.

CLEANING THE CUSTOMAIR BACKREST

The ObusForme® CustomAIR® Backrest cover is made of synthetic materials. It's easy to clean with a mild soap and a sponge, damp cloth, or soft brush. Do not rub the cover excessively or place it in a washing machine.

Please Note: The ObusForme® CustomAIR® Backrest may in some cases require time to get used to. Over the years your spine has become less flexible, and needs time to adjust to its natural shape again. If you feel discomfort when using your ObusForme® CustomAIR® Backrest for the first time, it is recommended that you use it for shorter periods of time, gradually increasing your usage until you feel comfortable.

If you have a very sore back or small curvature (lumbar area), it is highly recommended that you allow yourself a break-in period of at least 30 days in order to obtain the full benefits of your ObusForme® CustomAIR® Backrest.

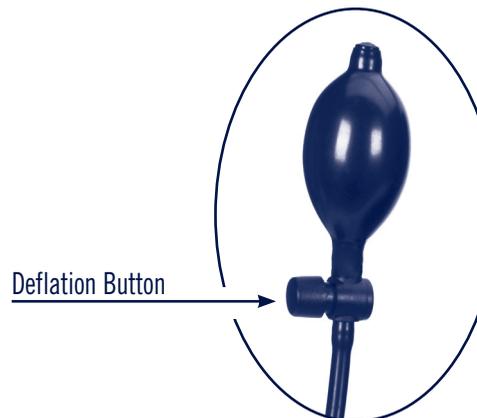

OBUSFORME® LIMITED WARRANTY

(CANADA Only)

ObusForme guarantees this product will be free from defects in workmanship & materials for a period of one (1) year from the date of original purchase. This guarantee applies when the product is used for the purpose intended. In the advent of a defect as described above, the product will be replaced with a new or refurbished product &/or substitute if the purchaser can provide the original purchase receipt with the defective product. Shipping, customs, duties & taxes must be PRE-PAID TO & FROM ObusForme by the PURCHASER. This warranty gives you rights that vary by province/state. This warranty may change.

WHAT IS NOT COVERED

Wear & tear, aging (including foam discoloration, flattening, density, consistency), accidental damages, alterations, mishandling, faulty adjustment, misuse, improper care, power damage, rental use, discontinued items, service by anyone other than ObusForme, shipping damages, neglect, items sold 'as is' or damage due to natural acts are NOT covered.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

Please obtain a Return Authorization Number & instructions prior to sending your item or it may be denied. Please contact Customer Service by:

HoMedics Group Canada
6460 Kennedy Road, Unit C
Mississauga, Ontario, Canada L5T 2X4
Tel: (416) 785-1386 Fax: (416) 785-5862
Toll Free: 1-888-225-7378
8:30 a.m. to 5:00 p.m., Mon - Fri EST
CustomerServiceCAN@obusforme.com
www.obusforme.com

JUL. 2014

Register your product (s) to ensure faster and more efficient customer service. It will allow us to keep you up-to-date with warranty and product information. Please take a few minutes to register online now.

Register at
<http://www.obusforme.com/product-registration/>

OBUSFORME®

Corporate Member of ACE
ACE

ASSOCIATION OF CANADIAN ERGONOMISTS

L'Association
chiropratique
canadienne



Canadian
Chiropractic
Association

IB-CLPROF01A

OBUSFORME®

Professional

CONÇU POUR LE CORPS HUMAIN™

DOSSIER CUSTOMAIR® LOMBAIRE RÉGLAGLE



CL-PROF-01

FÉLICITATIONS

Merci d'avoir choisi le support lombaire CustomAIR® d'ObusForme® avec réglage lombaire. Le support lombaire primé ObusForme® vous procure le support lombaire et le confort dont vous avez besoin pour prévenir et soulager les maux de dos.

Ce support lombaire, approuvé exclusivement par l'Association chiropratique canadienne, possède une forme en « S » s'adaptant à la morphologie du dos afin d'attribuer une position adéquate à la colonne vertébrale et vous procurer une position ergonomique lorsque vous êtes assis. Le support lombaire CustomAIR® d'ObusForme® comprend un système intégré de soutien lombaire pneumatique.

Léger et portable, chaque modèle de support lombaire transforme votre siège en un système de positionnement ergonomique; tous les modèles peuvent être utilisés à la maison, au bureau, dans la voiture, ou partout où vous vous assoyez.

AVERTISSEMENT

Avant d'utiliser votre support lombaire CustomAIR® d'ObusForme® dans un véhicule, veuillez consulter le manuel du propriétaire afin de vous assurer de pouvoir ajuster le siège du véhicule ou l'appui-tête après avoir installé votre support lombaire CustomAIR® d'ObusForme®.

UTILISATION DU SYSTÈME DE SUPPORT LOMBAIRE RÉGLABLE

REMARQUE IMPORTANTE : DÉGONFLEZ TOUJOURS L'APPAREIL AVANT D'AJUSTER LA PARTIE VERTICALE DU COUSSIN DE SUPPORT LOMBAIRE. Consultez la section DÉGONFLER ci-dessous pour obtenir des instructions sur la façon de dégonfler l'appareil.

Le dispositif pneumatique et intégré de support offre un appui additionnel pour le bas de la colonne vertébrale en soutenant la courbe du bas du dos. Pour ajuster le soutien lombaire à la hauteur vous procurant le plus grand confort, tirez la sangle supérieure pour lever le support lombaire. Tirez la sangle vers le bas pour abaisser le support lombaire. Une fois la position verticale optimale déterminée, gonflez le support à l'aide de la poire rangée dans la poche pratique en velcro, sur le côté du support lombaire. Les supports lombaires peuvent être utilisés tous les jours en tant que soutien additionnel, ou pour diminuer le stress dorsal subi par les personnes ayant de la lordose marquée ou de la cypholordose.

Veuillez noter : L'utilisation du dispositif pneumatique et intégré de support est optionnelle. Si ce support additionnel est encombrant ou inconfortable, c'est que vous n'avez probablement pas une courbure marquée de la colonne vertébrale, et vous n'avez donc pas besoin de ce renforcement supplémentaire. Ajustez le système de support lombaire vers le haut ou le bas, selon le besoin, ainsi que le niveau de gonflement, de manière à maximiser votre confort.

REMARQUE : La poire de gonflement et son tube doivent être rangés dans la poche une fois l'ajustement terminé.

GONFLER ET DÉGONFLER LE SUPPORT LOMBAIRE

GONFLER : appuyez le bas de votre dos contre le support lombaire CustomAIR®. Au fur et à mesure que le dispositif se gonfle, celui-ci offre environ 50 positions confortables. Une fois que vous avez atteint la position la plus confortable, vous n'avez qu'à cesser de gonfler. Le niveau d'air dans le support lombaire demeurera le même jusqu'à ce qu'une modification soit effectuée.


DÉGONFLER : appuyez sur le bouton de dégonflement, situé au-dessus de la poire, au bout du tube de gonflement.

NETTOYAGE DU SUPPORT LOMBAIRE CUSTOMAIR

Le revêtement du support lombaire CustomAIR® d'ObusForme® est fabriqué à partir de matériaux synthétiques. Par conséquent, il est facile de le nettoyer avec un savon doux et une éponge, un linge humide, ou une brosse douce. Ne frottez pas le revêtement avec force et ne le lavez pas dans une machine à laver.

Veuillez noter : dans certains cas, l'adaptation au support lombaire CustomAIR® d'ObusForme® nécessite une certaine période. Au fil des ans, la colonne vertébrale perd en flexibilité et a besoin de temps avant de reprendre sa posture naturelle. Si votre support lombaire CustomAIR® d'ObusForme® vous semble inconfortable durant la première utilisation, nous vous recommandons d'opter pour de courtes durées d'utilisation, et d'augmenter la durée d'utilisation au fur et à mesure que le confort s'accroît.

Si vous avez des maux de dos importants ou des courbures (au niveau lombaire), l'adaptation peut prendre un certain temps. Nous vous recommandons fortement d'utiliser votre support lombaire CustomAIR® d'ObusForme® pendant au moins 30 jours, afin d'en maximiser les bienfaits, avant de tirer des conclusions.

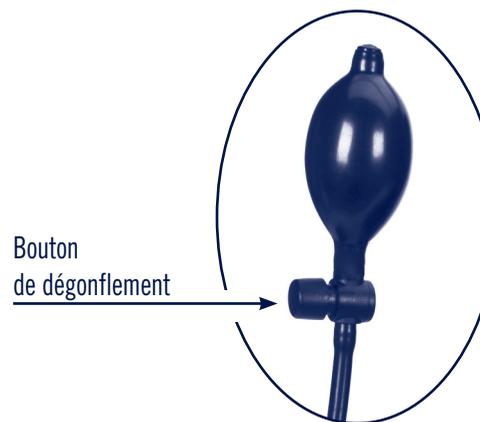

Bouton
de dégonfler

GARANTIE D'ObusForme Limitée

(Canada Seulement)

ObusForme garantit ce produit contre tout défaut de fabrication et de matériel pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat originale. Cette garantie s'applique si le produit est utilisé aux fins prévues. Dans l'éventualité d'une défectuosité décrite ci-dessus, ObusForme remplacera le produit par un produit identique ou équivalent nouveau ou remis à neuf si l'acheteur peut fournir le produit défectueux accompagné du reçu d'achat original. Lorsqu'un produit est envoyé à ObusForme®, l'expédition, les frais de douane et les taxes doivent être PRÉPAYÉES À L'ENVOI ET AU RETOUR PAR L'ACHETEUR. Cette garantie vous donne des droits pouvant varier d'un État ou d'une province à l'autre. Cette garantie peut faire l'objet de modification.

ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

La garantie NE COUVRE PAS l'usure normale, le vieillissement (y compris la décoloration de la mousse, l'aplanissement, la densité et la consistance), les dommages accidentels, une altération, une mauvaise manipulation, un mauvais ajustement, une mauvaise utilisation, un mauvais entretien, des dommages électriques, une utilisation sous location, les produits abandonnés, une réparation réalisée par quiconque autre qu'un professionnel autorisé par ObusForme®, les dommages durant l'expédition, la négligence, les produits vendus « tels quels », ou les dommages causés par un sinistre naturel.

COMMENT OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE

Avant d'expédier votre appareil, vous devez recevoir une autorisation et des instructions de renvoi, sans quoi votre demande sera REJETÉE. Veuillez obtenir un formulaire d'autorisation auprès de notre service à la clientèle :

HoMedics Group Canada
6460 Kennedy Road, Unit C
Mississauga, Ontario, Canada L5T 2X4
Tél. : (416) 785-1386 Téléc. : (416) 785-5862
Sans frais : 1 888 225-7378
de 8 h 30 à 17 h HE, du lundi au vendredi
CustomerServiceCAN@obusforme.com
www.obusforme.com

JUL 2014

Inscrivez votre/vos produit(s) pour assurer un service à la cliente plus rapide et efficace. Cela nous permettra de vous garder à jour sur la garantie et les renseignements sur les produits. Veuillez prendre quelques minutes pour les inscrire en ligne maintenant à

<http://www.obusforme.com/product-registration/>

OBUSFORME®

Membre corporatif de l'ACE
ACE
ASSOCIATION CANADIENNE D'ERGONOMIE

L'Association
chiropratique
canadienne
**Canadian
Chiropractic
Association**

IB-CLPROF01A