

OBUSFORME®
ENGINEERED FOR THE HUMAN BODY™

ULTRAFORME™ UNIVERSAL BACKREST



English, Français

UF-BLK-UNI

CONGRATULATIONS

on your purchase of the UltraForme™ Universal Backrest. Our unique convex and concave design helps align your spine into its proper curvature, as well as aiding in the relief and prevention of back problems. The adjustable UltraForme Universal Backrest offers custom back support to people of all sizes.

SCIENTIFICALLY TESTED

The UltraForme Universal Backrest relieves back pain by offering complete spinal support while minimizing damaging pressure points and disc pressure. Properly used, it will also significantly reduce muscle strain in the lower back and increase respiratory capacity.

For optimal results, use the UltraForme Universal Backrest with the ObusForme Contoured Seat Cushion to create a complete, comfortable and ergonomic sitting experience for your home, office or car. Together, these unique products encourage proper alignment between the pelvis and spine and further reduce pressure in the back, providing even more comfort for you each and every day.

USING YOUR OBUSULTRAFORME BACKREST

1. Unfasten the buckles at the back of the backrest and place the backrest against the back of the seat/ chair where the device will be used.
2. Sit back and align your back against the UltraForme Universal Backrest. Move the backrest up and down until the curvature of your UltraForme Universal Backrest most comfortably meets your lumbar curvature (the small of your back).
3. Hold the backrest in place and turn around to make note of the distance between the spot where the base of the backrest meets the back of the chair and

the seat of the chair. If necessary, adjust the length of the slider between the top and bottom portions of the backrest so that the base of the backrest sits on the seat cushion and the backrest most comfortably meets your lumbar curvature.

Should you need to position the backrest higher than the adjustable base permits, adjust the slider position to whatever length suits you best and use the two quick-connect straps at the rear of the backrest to tightly secure the backrest to the chair in your ideal position.

4. Adjust the position of the back of your chair by tilting it backwards or forward as necessary.
5. Before using your UltraForme Universal Backrest in a vehicle, please consult the owner's manual to ensure that you can properly adjust your vehicle's seat and/or headrest after installation of the UltraForme Universal Backrest.

Please Note: The UltraForme Universal Backrest may in some cases require time to get used to. Over the years, your spine has become less flexible and needs time to adjust to its natural shape again. If you feel discomfort when using your UltraForme Universal Backrest for the first time, it is recommended that you use it for shorter periods of time, gradually increasing your usage until you feel comfortable. If you have a very sore back or small curvature (lumbar area), it is highly recommended that you allow yourself a break-in period of at least 30 days in order to obtain the full benefits of your UltraForme Universal Backrest. Those with scoliosis or a history of disc fusion surgery may not get the full benefit of the UltraForme Universal Backrest. For these individuals, we recommend professional advice to determine if the ObusForme® Lowback Backrest Support is right for you.

EASY CARE

Most cleaning can be easily accomplished with the use of a mild soap and water solution. However, we do suggest that you do a spot cleaning trial on an inconspicuous area. Do not rub the cover or immerse the entire cover in water as it may shrink.

ADJUSTING YOUR BACKREST LENGTH



CLOSED
POSITION
(Shortest Height)



EXTENDED
POSITION
(Tallest Height)



OBUSFORME® LIMITED WARRANTY

(CANADA Only)

ObusForme guarantees this product will be free from defects in workmanship & materials for a period of one (1) year from the date of original purchase. This guarantee applies when the product is used for the purpose intended. In the advent of a defect as described above, please return this product to ObusForme for refund or replacement. This warranty gives you rights that vary by province/state. This warranty may change.

WHAT IS NOT COVERED

Wear & tear, aging (including foam discoloration, flattening, density, consistency), accidental damages, alterations, mishandling, faulty adjustment, misuse, improper care, power damage, rental use, discontinued items, service by anyone other than ObusForme, shipping damages, neglect, items sold 'as is' or damage due to natural acts are NOT covered.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

Please obtain a Return Authorization Number & instructions prior to returning your item or it may be denied. Please contact Customer Service by:

Telephone: 1-888-225-7378 or 416-785-1386
Mon – Fri, 8:30 a.m. to 5:00 p.m., EST

Fax: (416) 785-5862

Email: CustomerServiceCAN@obusforme.com

Mail:
HoMedics Group Canada
6460 Kennedy Road, Unit C
Mississauga, Ontario, Canada L5T 2X4

DEC. 2017

Register your product (s) to ensure faster and more efficient customer service. It will allow us to keep you up-to-date with warranty and product information. Please take a few minutes to register online now.

Register at
<http://www.obusforme.com/product-registration/>

OBUSFORME®

Corporate Member
Membre Corporatif
ACE

Association of Canadian Ergonomists
Association Canadienne d'Ergonomie

L'Association
chiropratique
canadienne



Canadian
Chiropractic
Association

GARANTIE D'OBUSFORME LIMITÉE

(Canada Seulement)

ObusForme garantit que ce produit sera exempt de défauts de qualité d'exécution et de matériel pour une période d'une (1) année à compter de la date d'achat initiale. La garantie est applicable lorsque le produit est utilisé aux fins auxquelles il est destiné. Advenant l'apparition d'un défaut tel que décrit ci-dessus, veuillez retourner ce produit chez ObusForme afin d'obtenir un remboursement ou un remplacement. La présente garantie vous accorde des droits pouvant varier selon la province ou l'état. La présente garantie peut être modifiée.

CE QUI N'EST PAS COUVERT :

Usure normale, vieillissement (y compris décoloration de la mousse, aplatissement, densité, consistance), dommages accidentels, altérations, manipulation sans précaution, réglage inadéquat, usage abusif, mauvais entretien, dommages au niveau de l'alimentation électrique, utilisation locative, articles abandonnés, entretien ou réparation par du personnel autre que celui d'ObusForme, dommages subis durant l'expédition, négligence, articles vendus « tels quels » ou dommages causés par les éléments naturels ne sont PAS couverts.

COMMENT OBTENIR LE SERVICE AU TITRE DE LA GARANTIE

Veuillez obtenir un Numéro d'autorisation de retour et des directives avant de retourner votre article, sans quoi votre réclamation pourra être refusée. Veuillez contacter le Service à la clientèle comme suit :

Téléphone : 1-888-225-7378 ou 416-785-1386
Lun – Ven, de 8 h 30 à 17 h 00, HNE

Télécopieur : 416-785-5862

Courriel : CustomerServiceCAN@obusforme.com

Poste régulière :
HoMedics Group Canada
6460, chemin Kennedy, unité C
Mississauga, Ontario, Canada L5T 2X4
DEC. 2017

Enregistrez votre (vos) produit(s) afin d'obtenir un service à la clientèle plus rapide et plus efficace. Ceci nous permettra de vous garder à jour avec la garantie et les renseignements sur le produit. Veuillez prendre quelques minutes pour vous enregistrer en ligne maintenant. Enregistrez-vous à

<http://www.obusforme.com/product-registration/>

OBUSFORME®

Corporate Member
Membre Corporatif

ACE

Association of Canadian Ergonomists
Association Canadienne d'Ergonomie

L'Association
chiropratique
canadienne

ACA

Canadian
Chiropractic
Association

IB-UFBLKUNIA

OBUSFORME®

CONÇU POUR LE CORPS HUMAIN™

DOSSIER UNIVERSEL ULTRAFORME™



Français, English

UF-BLK-UNI

FÉLICITATIONS

d'avoir choisi le support dorsal universel UltraForme™. Notre modèle convexe et concave unique aide à positionner adéquatement votre colonne vertébrale, ainsi qu'à soulager et prévenir les problèmes de dos. Le support dorsal universel UltraForme™ réglable offre un soutien personnalisé pour tous, peu importe votre taille.

ÉPROUVÉ SCIENTIFIQUEMENT

Éprouvé scientifiquement, le support dorsal universel UltraForme™ soulage des maux de dos en procurant un support complet de la colonne tout en minimisant les points de pressions et la tension au niveau des vertèbres. De plus, lorsque cet appareil est utilisé adéquatement, il réduit la tension musculaire du bas du dos et améliore la capacité respiratoire.

Pour un résultat optimal, utilisez le support dorsal universel UltraForme™ avec le coussin adapté ObusForme pour former un dispositif complet, confortable et ergonomique lorsque vous vous assoyez à la maison, au bureau ou dans la voiture. Ensemble, ces appareils uniques favorisent l'alignement adéquat du corps entre le bassin et la colonne vertébrale, et diminuent la pression subie par le dos, ce qui vous procure un confort accru, jour après jour.

UTILISATION DU SUPPORT DORSAL OBUSULTRAFORME

1. Détachez les boucles à l'arrière du support dorsal et placez-le contre le dossier du siège ou de la chaise où vous utiliserez l'appareil.
2. Assoyez-vous et alignez votre dos contre le support dorsal universel UltraForme™. Bougez l'appareil vers le haut et le bas jusqu'à ce que les courbes de votre support dorsal universel UltraForme™ reposent confortablement sur les courbes de votre dos (le bas du dos).
3. Tenez le support dorsal en place et tournez-vous pour prendre connaissance de la distance entre

l'endroit où la base du support touche le dossier et l'assise du siège ou de la chaise. Au besoin, ajustez la longueur de l'appareil en réglant le glissoir entre la portion supérieure et inférieure du support dorsal de manière à ce que sa base repose sur l'assise du siège ou de la chaise et que l'appareil soit le mieux adapté aux courbes de votre dos.

Si vous souhaitez placer le support dorsal plus haut que la portée maximale de la base réglable, ajustez le glissoir à la longueur qui vous convient le mieux et fixez le support dorsal à la hauteur qui vous procure le plus grand confort à l'aide des deux sangles à fixation rapide qui se trouve à l'arrière.

4. Ajustez la position du dossier en le penchant vers l'avant ou l'arrière, selon le besoin.
5. Avant d'utiliser votre support dorsal universel UltraForme™ dans un véhicule, veuillez consulter le manuel du propriétaire afin de vous assurer de pouvoir ajuster le siège ou l'appui-tête du véhicule ou votre support dorsal universel UltraForme™ une fois installé.

Veuillez noter : dans certains cas, l'adaptation du support dorsal universel UltraForme™ nécessite une certaine période. Au fil des ans, la colonne vertébrale perd en flexibilité et a besoin de temps avant de reprendre sa posture naturelle. Si votre support dorsal universel UltraForme™ vous semble inconfortable durant la première utilisation, nous vous recommandons d'opter pour de courtes durées d'utilisations, et d'augmenter la durée d'utilisation au fur et à mesure que le confort s'accroît. Si vous avez des maux de dos importants ou des courbures (au niveau lombaire), nous vous recommandons fortement d'utiliser votre support dorsal pendant au moins 30 jours afin d'en maximiser les bienfaits. Les personnes atteintes de scoliose ou ayant eu une opération pour spondylodèse peuvent ne pas profiter de tous les avantages du support dorsal universel UltraForme™. Nous recommandons à ces personnes d'obtenir l'avis d'un professionnel, à savoir si le support dorsal universel UltraForme™ leur convient.


ENTRETIEN FACILE

La plupart du temps, l'entretien de cet appareil peut être effectué à l'aide d'un savon doux et d'eau. Par contre, nous vous recommandons de tester votre solution nettoyante sur une partie de l'appareil moins en évidence. Ne frottez pas le revêtement et ne l'immergez pas dans l'eau, car il pourrait rétrécir.

RÉGLEZ LA LONGUEUR DU SUPPORT DORSAL



POSITION
FERMÉE
(plus petite taille)

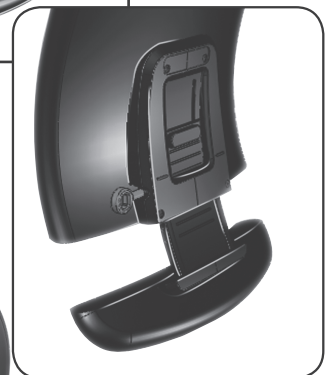

POSITION
OUVERTE
(plus grande taille)

