

CONTOURED SEAT CUSHION



English, Français

CONGRATULATIONS

Thank you for your purchase of the ObusForme® Contoured Seat Cushion. The unique design of the ObusForme® Contoured Seat Cushion encourages proper alignment of the pelvis and thighs, evenly distributing body weight for extended comfort while sitting. It cushions your tailbone, sitting bones and thighs to help alleviate pressure points.

You can use the ObusForme® Contoured Seat Cushion on its own, or with any ObusForme® Backrest Support to create a complete and comfortable ergonomic sitting experience.

Lightweight and portable, the ObusForme® Contoured Seat Cushion promotes sitting comfort for prolonged periods anywhere – at home, in the office and on the go. The ObusForme® Contoured Seat Cushion is exclusively endorsed by the Canadian Chiropractic Association.



Association of Canadian Ergonomists
Association Canadienne d'Ergonomie



FEATURES


- 1) Contoured sides effectively support your pelvis and hips in a comfortably balanced position.
- 2) Raised center portion separates your legs slightly and rocks your pelvis backward to eliminate excess lumbar curve and reduce spinal strain.
- 3) Cut-out at the center of the seat's posterior reduces pressure on your tailbone.
- 4) Removable front zippered section adjusts the depth to accommodate almost any chair, allowing for proper knee clearance.
- 5) Two tabs at the rear section allow you to securely attach your ObusForme® Contoured Seat Cushion to any ObusForme® Backrest Support.
- 6) Polyurethane foam construction absorbs compression forces and dissipates vibration created in moving vehicles, reducing wear and tear on your spine.

CREATE YOUR OWN ERGONOMIC SEATING SYSTEM

Achieve total comfort when you use your ObusForme® Contoured Seat Cushion with any ObusForme® Backrest Support. These two products complement each other to ensure your total sitting comfort. Each promotes correct posture to help prevent and relieve back pain.

HOW TO ATTACH YOUR OBUSFORME® CONTOURED SEAT CUSHION TO AN OBUSFORME® BACKREST SUPPORT

To attach the ObusForme® Contoured Seat Cushion to an ObusForme® Backrest Support, open the back seam (point A) on the ObusForme® Backrest Support. Insert the two tabs of the Seat (point B). Press the seam to close.

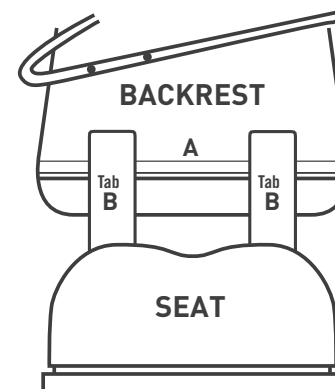

Please Note: The ObusForme® Contoured Seat Cushion should be placed in front, and at the base of, the ObusForme® Backrest Support. The ObusForme® Backrest Support should never rest on top of the ObusForme® Contoured Seat Cushion.

USE & CARE TIPS

Adjust the ObusForme® Contoured Seat Cushion To Fit Any Narrow Chair

The ObusForme® Contoured Seat Cushion should never overlap or fold over the front of any chair. If it does, simply remove the front zippered section.



CLEANING YOUR OBUSFORME SEAT

- Sponge wash the cover of your ObusForme® Contoured Seat Cushion;
DO NOT rub excessively.
- DO NOT place the ObusForme® Contoured Seat Cushion or its cover in the washing machine.

Materials

- 100% Polycarbonate frame
- 100% Polyurethane foam fill (CA 117 fire retardant)
- 100% Polyester cover

OBUSFORME® LIMITED WARRANTY

ObusForme guarantees this product will be free from defects in workmanship & materials for a period of one (1) year from the date of original purchase. This guarantee applies when the product is used for the purpose intended. In the advent of a defect as described above, the product will be replaced with a new or refurbished product &/or substitute if the purchaser can provide the original purchase receipt with the defective product. Shipping, customs, duties & taxes must be PRE-PAID TO & FROM ObusForme by the PURCHASER. This warranty gives you rights that vary by province/state. This warranty may change

WHAT IS NOT COVERED

Wear & tear, aging (including foam discoloration, flattening, density, consistency), accidental damages, alterations, mishandling, faulty adjustment, misuse, improper care, power damage, rental use, discontinued items, service by anyone other than ObusForme, shipping damages, neglect, items sold 'as is' or damage due to natural acts are NOT covered.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

Please obtain a Return Authorization Number & instructions prior to sending your item or it may be denied. Please contact Customer Service.

HoMedics Group Canada
6460 Kennedy Road. Unit C
Mississauga, Ontario, Canada L5T 2X4
Tel: (416) 785-1386 Fax: (416) 785-5862
Toll Free: 1-888-225-7378
8:30 a.m. to 5:00 p.m., Mon - Fri EST
CustomerServiceCAN@obusforme.com
www.obusforme.com

Rev. NOV. 2018

Register your product (s) to ensure faster and more efficient customer service. It will allow us to keep you up-to-date with warranty and product information. Please take a few minutes to register online now.

Register at
<http://www.obusforme.com/product-registration/>

OBUSFORMETM

GARANTIE D'OBUSFORME LIMITÉE

ObusForme garantit ce produit contre tout défaut de fabrication et de matériel pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat originale. Cette garantie s'applique si le produit est utilisé aux fins prévues. Dans l'éventualité d'une défectuosité décrite ci-dessus, ObusForme remplacera le produit par un produit identique ou équivalent nouveau ou remis à neuf si l'acheteur peut fournir le produit défectueux accompagné du reçu d'achat original. Lorsqu'un produit est envoyé à ObusForme®, l'expédition, les frais de douane et les taxes doivent être PRÉPAYÉES À L'ENVOI ET AU RETOUR PAR L'ACHETEUR. Cette garantie vous donne des droits pouvant varier d'un État ou d'une province à l'autre. Cette garantie peut faire l'objet de modification.

ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

La garantie NE COUVRE PAS l'usure normale, le vieillissement (y compris la décoloration de la mousse, l'aplanissement, la densité et la consistance), les dommages accidentels, une altération, une mauvaise manipulation, un mauvais ajustement, une mauvaise utilisation, un mauvais entretien, des dommages électriques, une utilisation sous location, les produits abandonnés, une réparation réalisée par quiconque autre qu'un professionnel autorisé par ObusForme®, les dommages durant l'expédition, la négligence, les produits vendus « tels quels », ou les dommages causés par un sinistre naturel.

COMMENT OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE

Avant d'expédier votre appareil, vous devez recevoir une autorisation et des instructions de renvoi, sans quoi votre demande sera REJETÉE. Veuillez obtenir un formulaire d'autorisation auprès de notre service à la clientèle :

HoMedics Group Canada
6460 Kennedy Road. Unit C
Mississauga, Ontario, Canada L5T 2X4
Tél. : (416) 785-1386 Téléc. : (416) 785-5862
Sans frais : 1 888 225-7378
de 8 h 30 à 17 h HE, du lundi au vendredi
CustomerServiceCAN@obusforme.com
www.obusforme.com

Rev. NOV 2018

Inscrivez votre/vos produit(s) pour assurer un service à la cliente plus rapide et efficace. Cela nous permettra de vous garder à jour sur la garantie et les renseignements sur les produits. Veuillez prendre quelques minutes pour les inscrire en ligne maintenant à

<http://www.obusforme.com/product-registration/>

OBUSFORMETM

OBUSFORMETM
CONÇU POUR LE CORPS HUMAIN

COUSSIN DE SIÈGE PROFILÉ



Français, English

FÉLICITATIONS

Merci d'avoir choisi le coussin de siège profilé ObusForme®. Le modèle unique du coussin de siège profilé ObusForme® favorise l'alignement adéquat du bassin et des hanches, pour une distribution équilibrée du poids du corps et un confort prolongé en position assise. Ce produit offre un confort coussiné au coccyx, aux os impliqués dans la posture assise et aux cuisses pour alléger les points de pression.

Vous pouvez utiliser le coussin de siège profilé ObusForme® seul ou avec un dossier ObusForme® pour ainsi obtenir une position assise confortable et ergonomique.

Léger et portatif, le coussin de siège profilé ObusForme® vous procure un maximum de confort lorsque vous êtes en position assise pendant une longue période, et ce, partout - à la maison, au bureau ou sur la route. Le coussin de siège profilé ObusForme® est approuvé exclusivement par l'Association chiropratique canadienne.



Association of Canadian Ergonomists
Association Canadienne d'Ergonomie



CARACTÉRISTIQUES

- 1) Le contour profilé soutient adéquatement le bassin et les hanches afin d'obtenir une position confortable et équilibrée.
- 2) La partie centrale surélevée sépare légèrement les jambes et positionne le bassin vers l'arrière afin d'atténuer la courbure lombaire et de diminuer le stress subi par la colonne.
- 3) Le creux à l'arrière centre du coussin diminue la pression exercée sur le coccyx.
- 4) La section avant à fermeture éclair, détachable, permet d'ajuster la profondeur du coussin; le coussin est ainsi compatible avec la plupart des chaises, procure un dégagement adéquat des genoux.
- 5) Les deux sangles situées à l'arrière du coussin vous permettent de fixer sécuritairement le coussin de siège profilé ObusForme® à n'importe quel dossier ou support lombaire ObusForme®.
- 6) La mousse en polyuréthane contenue dans le coussin absorbe la compression et dissipe les vibrations émises par un véhicule en mouvement, ce qui diminue le stress subi par la colonne vertébrale.


CRÉEZ VOTRE PROPRE POSITION ASSISE ERGONOMIQUE

Obtenez un maximum de confort en jumelant le coussin de siège profilé ObusForme® à n'importe quel dossier ou support lombaire ObusForme®. Ces deux produits se complètent et vous procurent un confort accru en position assise. Chacun des produits favorise une posture adéquate et aide à prévenir et soulager les maux de dos

COMMENT FIXER LE SIÈGE PROFILÉ OBUSFORME[®]

À N'IMPORTE QUEL DOSSIER OU SUPPORT LOMBAIRE OBUSFORME[®]

Pour fixer le siège profilé ObusForme® à un dossier ObusForme®, ouvrez la couture arrière (point A) du dossier ObusForme®. Insérez les deux sangles du coussin de siège (point B). Appuyez sur la couture pour refermer.

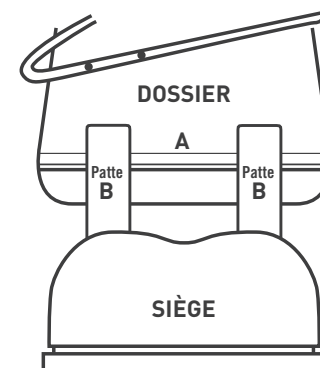

Veuillez noter : Le coussin de siège profilé ObusForme® doit être placé à l'avant et à la base du dossier ObusForme®. Le dossier ObusForme® ne doit jamais appuyer sur le coussin de siège profilé ObusForme®.

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Ajustement du coussin de siège profilé ObusForme® à n'importe quelle chaise étroite

Le coussin de siège profilé ObusForme® ne doit jamais dépasser l'avant de la chaise. Si c'est le cas, enlevez la section avant à fermeture éclair.



NETTOYAGE DU COUSSIN DE SIÈGE OBUSFORME[®]

- Lavez le revêtement du coussin de siège profilé ObusForme® à l'aide d'une éponge; NE FROTTEZ PAS avec force.
- NE PLACEZ PAS le coussin de siège profilé ObusForme® ou son revêtement dans une machine à laver.

Matériaux

- Cadre 100 % polycarbonate
- Rembourrage 100 % en mousse polyuréthane (CA 117 produit ignifuge)
- Revêtement 100 % polyester